



Información general:

Descripción de Producto	Monitor de Presión Arterial de Muñeca
Nombre comercial	RS6
Código intl.	HEM-6221-E
Categoría de producto	Monitor de Presión Arterial de Muñeca
Fabricante Legal	 OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 JAPAN
Centro de Producción	OMRON (DALIAN) Co., LTD. Dalian, China
Foto de Producto	
Contenido del envase	Unidad principal, muñequera en forma plegada suave, juego de pilas (2 x AAA), manual de instrucciones, estuche protector, tarjeta de garantía, fiche de registros de tensión
Código EAN	4015672107373

Información logística:

Unidad	Cant.	Peso aprox.	Dimensiones aprox. an x fo x al mm
Unidad principal sin pilas	1	85 g	87 (w) mm x 64 (h) mm x 14 (d) mm (sin la muñequera)
Envase comercial	1	Por determinar tras la primera producción	al 110 mm x an 90 mm x fo 90 mm
Caja de Cartón	20	Por determinar tras la primera producción	Por determinar



Particularidades

RS6 (HEM-6221-E) es un monitor automático de presión arterial de muñeca que tiene las siguientes características:

- . • **Tecnología Intellisense**
- . • **Guía de ajuste correcto del manguito**
- . • **Velocidad y presión optimizadas para un inflado/desinflado suave**
- . • **Muñequera en forma plegada suave fácil de colocar**
- . • **Detección de arritmias**
- . • **Indicador del nivel de presión arterial**
- . • **Sensor de Posición Avanzado**
- . • **Medición silenciosa**
- . • **Detector de movimiento corporal**
- . • **Promedio de las últimas 3 mediciones**
- . • **90 memorias**

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

Descripción de Producto	Monitor automático de Presión Arterial de Muñeca
Modelo	OMRON RS6 HEM-6221-E
Pantalla	LCD Digital
Método de medición	Oscilométrico
Idiomas	IN, AL, FR, IT, ES, HO, RU, AR
Rango de Medición	Presión: de 0 mmHg a 299 mmHg Pulso: de 40 a 180/min.
Memoria	90 memorias
Partes en contacto	= Tipo B
Protección contra descargas eléctricas	Equipo ME ensamblado internamente
Precisión	Presión: ± 3 mmHg Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura en pantalla
Inflado	Automático por bomba
Desinflado	Automático rápido
Detección de Presión	Sensor de presión capacitivo
Alimentación	2 pilas alcalinas "AAA" (LR03) de 1.5V
Duración de las pilas	Aproximadamente 300 mediciones con pilas alcalinas nuevas a una temperatura ambiente de 23°C
Temperatura / Humedad de funcionamiento	De +10°C a +40°C Máximo: de 30% a 85% HR



Temperatura / Humedad de conservación	De -20°C a +60°C Máximo: de 10% a 95% HR
Peso de la consola	Aproximadamente 85 g sin pilas
Dimensiones externas	Aproximadamente 87 (an) mm x 64 (al) mm x 14 (fo) mm (sin la muñequera)
Rango de perímetro de muñeca	Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm
Material de la muñequera	Nylon y poliéster
Contenido del envase	Unidad principal, juego de pilas, manual de instrucciones, tarjeta de garantía, estuche protector, ficha de registros de tensión

CE0197

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la directiva CE 93/42/EEC (Directiva para Productos Sanitarios).

- Este monitor de presión arterial está diseñado según el estándar europeo EN1060, Esfigmomanómetros No invasivos Parte 1: Requisitos Generales y Parte 3: Requisitos Suplementarios para sistemas electromecánicos de medida de la presión arterial.
- Este producto OMRON está producido bajo el estricto sistema de calidad de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japón. El componente fundamental de los monitores de presión arterial OMRON, el Sensor de Presión, está producido en Japón.

Uso previsto

Finalidad médica

Este producto está destinado a la medición y registro de los niveles de presión arterial de pacientes.

Usuarios

- Médicos legalmente cualificados, como doctores, enfermeros y auxiliares, personal sanitario o pacientes bajo la guía de médicos cualificados.
- El usuario debe ser capaz de comprender el funcionamiento general de este dispositivo y el contenido del manual de instrucciones.

Pacientes

Este producto no debe ser usado por pacientes que no están conscientes o no respiran espontáneamente, niños no vigilados o personas que no puedan expresar su propósito.

Entorno

Este producto está destinado al uso en un centro médico, clínico y consulta médica, y en una habitación del hogar.

All for Healthcare

OMRON

Envase



All for Healthcare

OMRON

Cara Frontal ampliada



All for Healthcare

Cara Trasera ampliada

EN • RS6 Wrist blood pressure monitor. Clinically validated • Cuff wrapping guide • Irregular Heartbeat Detector • For wrist circumferences 13,5-21,5 cm • Hardcase • Batteries Included

NL • RS6 Pols bloeddrukmeter. Klinisch gevalideerd • Plaatsingsindicator manschet • Detectiesysteem voor onregelmatige hartslag • Voor polsometrek van 13,5-21,5 cm • Opbergdoos • Incl. batterijen

ES • RS6 Monitor de presión arterial de muñeca. Clínicamente validado • Guía para el ajuste correcto del manguito • Detección de arritmias • Para un perímetro de muñeca de 13,5-21,5 cm • Estuche protector rígido • Pilas incluidas

FR • RS6 Tensiomètre au poignet. Validation clinique • Guide d'enroulement du brassard • Détection des pulsations cardiaques irrégulières • Périmètre de poignet de 13,5-21,5 cm • Boîte de rangement • Piles fournies

IT • RS6 Misuratore di pressione a polso. Validato clinicamente • Sensore posizionamento bracciale • Rilevamento battito irregolare • Per circonferenza del polso da 13,5-21,5 cm • Custodia rigida • Batterie incluse

DE • RS6 Handgelenk-Blutdruckmessgerät. Klinisch validiert • Manschettsitzkontrolle • Erkennung unregelmäßiger Herzschläge • Für handgelenkumfang 13,5-21,5 cm • Aufbewahrungsbox • Batterien im Lieferumfang enthalten

RU • RS6 измеритель артериального давления на запястье. Клинически апробирован • Индикатор правильной фиксации манжеты • Индикатор аритмии • Для запястий окружностью 13,5-21,5 см • Жесткий футляр • Элементы питания входят в комплект

RS6-AR جهاز قياس ضغط الدم المعصمي
 تم التحقق منه سريريًا • دليل ربط الشريط
 الضاغط • اكتشاف نبضات القلب غير
 المنتظمة • حجم المعصم من 13.5 إلى 21.5 سم
 • الصلبة كيس • بطاريات في الداخل



4 015672 107373

DISTRIBUTED BY

WWW.OMRON-HEALTHCARE.COM

Panel Lateral 1 - Vista ampliada



Panel Lateral 2 - Vista ampliada





Tabla Comparativa

Descripción de Producto	Monitor de Presión Arterial de muñeca Digital Automático	Cambio del anterior modelo (R) al nuevo modelo (RS)	Monitor de Presión Arterial de muñeca Digital Automático
Modelo	OMRON R6 HEM-6052-E	Sí	OMRON RS6 HEM-6221-E
Memoria	2 x 90 memorias	No	90 memorias
Duración de las pilas	Aproximadamente 300 mediciones con pilas alcalinas nuevas a una temperatura ambiente de 23°C	No	Aproximadamente 300 mediciones con pilas alcalinas nuevas a una temperatura ambiente de 23°C
Dimensiones externas	Aproximadamente 70 (an) mm x 70 (al) mm x 21 (fo) mm (sin la muñequera)	No	Aproximadamente 87 (an) mm x 64 (al) mm x 14 (fo) mm (sin la muñequera)

Manual de Instrucciones



Introduction

Thank you for purchasing the OMRON® Wrist Blood Pressure Monitor.

The Wrist Blood Pressure Monitor is a compact and easy-to-use blood pressure monitor, operating on the oscillometric principle. It measures your blood pressure and pulse rate simply and quickly. For comfortable and accurate readings, the use of a pressure cuff with or without the device uses an advanced "intelligent" technology.

Important Safety Information

Consult your doctor prior to using a pressure monitor, and if diagnosed with any condition of the heart or blood vessels. Please read the entire manual before using the unit.

Warnings:

- This device is not intended for use by pregnant women.
- Do not use the device if you are pregnant or if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.



1. Overview

Main unit:

A. Main unit
B. Battery compartment
C. Display
D. Inflation/Deflation buttons
E. Power button
F. On/Off button
G. Memory button
H. Cuff mapping button

Display:

1. Memory symbol
2. System blood pressure
3. Diastolic blood pressure
4. Memory symbol
5. Inflation/Deflation buttons
6. Power button
7. On/Off button
8. Memory button
9. Cuff mapping button
10. Cuff mapping button
11. Cuff mapping button
12. Cuff mapping button
13. Cuff mapping button
14. Cuff mapping button
15. Cuff mapping button
16. Cuff mapping button
17. Cuff mapping button
18. Cuff mapping button
19. Cuff mapping button
20. Cuff mapping button



2. Preparation

1. Remove the battery cover.


2. Insert two 1.5V "AAA" alkaline (LR03) batteries as indicated in the battery compartment and then replace the battery cover.

3. Setting the Date and Time

1. Press the **ON/OFF** button.

2. Set the monitor to the correct date and time before taking a measurement for the first time.

3. Press the **START/STOP** button to store the setting.

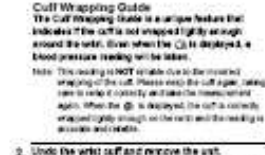

3. Using the Unit

3.1 Applying the Wrist Cuff

1. Put your arm through the cuff loop.

2. Wrap the wrist cuff around your wrist.

3.2 How to Sit Correctly

1. Take a measurement, you need to be relaxed and comfortable.

2. Take a measurement, you need to be relaxed and comfortable.

3.3 Taking a Reading

1. Press the **START/STOP** button.

2. Press the **START/STOP** button to store the setting.

Important Safety Information

Consult your doctor prior to using a pressure monitor, and if diagnosed with any condition of the heart or blood vessels. Please read the entire manual before using the unit.

Warnings:

- This device is not intended for use by pregnant women.
- Do not use the device if you are pregnant or if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.

General Precautions:

- Do not use the device if you are pregnant or if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.

2. Preparation

1. Remove the battery cover.

2. Insert two 1.5V "AAA" alkaline (LR03) batteries as indicated in the battery compartment and then replace the battery cover.

3. Setting the Date and Time

1. Press the **ON/OFF** button.

2. Set the monitor to the correct date and time before taking a measurement for the first time.

3. Press the **START/STOP** button to store the setting.

3. Using the Unit

3.1 Applying the Wrist Cuff

1. Put your arm through the cuff loop.

2. Wrap the wrist cuff around your wrist.

3.2 How to Sit Correctly

1. Take a measurement, you need to be relaxed and comfortable.

2. Take a measurement, you need to be relaxed and comfortable.

3.3 Taking a Reading

1. Press the **START/STOP** button.

2. Press the **START/STOP** button to store the setting.

Cuff Wrapping Guide

The cuff wrapping guide is a unique feature that indicates if the cuff is not wrapped tightly enough around the wrist. Once when the **ON/OFF** displays a blood pressure reading will be taken.

Important:

- Do not use the device if you are pregnant or if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.
- Do not use the device if you are taking any medication that affects blood pressure.